



사 용 설 명 서

모델명 : BH-LB06



光 복돌이는 피곤하고 지친 당신에게
건강의 빛으로 건강을 돌려드립니다.


HD₀ 해당 생활 과학

구성품 및 제품의 명칭

● 온도 조절기



● 본체

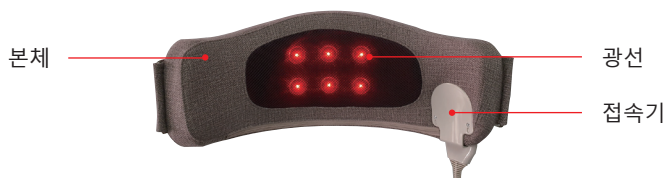

● 표시부



현재온도 표시
(온도설정시 설정온도 표시)



온열동작 표시
(온열동작시 표시)

사 용 방 법

- 1) 온도조절기의 접속코드를 본체에 붙어있는 접속부에 깊숙이 꽂아주십시오.
- 2) 전원코드를 AC 220V 콘센트에 삽입하여 주십시오.
- 3) 온도조절기 전원버튼을 눌러서 ON하십시오.
이때 조절기 전원 표시램프(적색)가 켜집니다.
- 4) 온도설정다이얼을 오른쪽으로 돌려서 원하시는 설정위치에 맞춰 주십시오.
이때 온열표시램프(적색)가 켜집니다.
- 5) 온도설정이 완료되면 온도표시창에 설정온도가 표시되고 잠시 후 본체실제온도가 표시됩니다.
- 6) 본체온도가 설정온도에 도달하면 온열표시램프(적색)가 꺼지고 설정온도 이하로 내려가면 온열표시램프가 켜지면서 본체에 전원이 공급됩니다.
- 7) 광선빛은 30분 ON 켜졌다가 5분 OFF 꺼짐으로 반복되어 작동됩니다.
- 8) 본 제품은 안전및절전을 위하여 자동 OFF 타이머 기능이 내장되어 있습니다.
8시간 경과후 자동으로 전원이 차단됩니다.
- 9) 다시 작동하시려면 전원버튼을 눌러 OFF 하셨다가 1분정도 지난후 다시 눌러 사용하시면 됩니다.
- 10) 사용하시기 10분전에 미리 예열시켜주세요.
제품 사용전에 약 50°C상태로 10분정도 미리예열하신 후 사용하시면 발열효과를 더 높일 수 있습니다.
- 11) 사용후에는 반드시 전원코드를 콘센트에서 분리하여 주십시오.

제 품 보 증 서

제 품 명	光 복돌이
모 델 명	BH - LB06
규 격	220V, 60HZ, 60W
제품 보증기간	제품 구입일로부터 12개월
구 입 일 자	년 월 일
판 매 원	(주)해당 엔 생활과학
AS 상 담 전 화	본사 : 02-336-7585 / 센터 : 031-321-1291

보 증 내 용

1. 제품 구입일로부터 12개월 이내에 정상적으로 사용한 상태에서 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드립니다.
2. 보증기간이 지난후 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리하여 드립니다.
3. 보상기준, 제품수리,교환,환불에 대한 보상기준은 기획재정부 고시소비자 피해보상기준을 따릅니다.
4. 다음 각항의 경우에는 보증대상에서 제외되며, 유상으로 처리됩니다.
 - * 첨부된 사용설명서의 설명 및 주의사항을 준수하지 아니하여 발생한 고장의 경우
 - * 제품의 해체 및 충격등 외부 요인으로 인한 고장의 경우
 - * 소모성 부품의 수명이 다한 경우
 - * 본 보증서의 제시가 없는 경우